


SoftSkin *Air*

ソフトスキン エア

ご好評のAirライナーに「**大腿用**」が追加されました。
大腿用専用の外装布により
縦伸びを抑制しつつ横方向への伸びを実現。

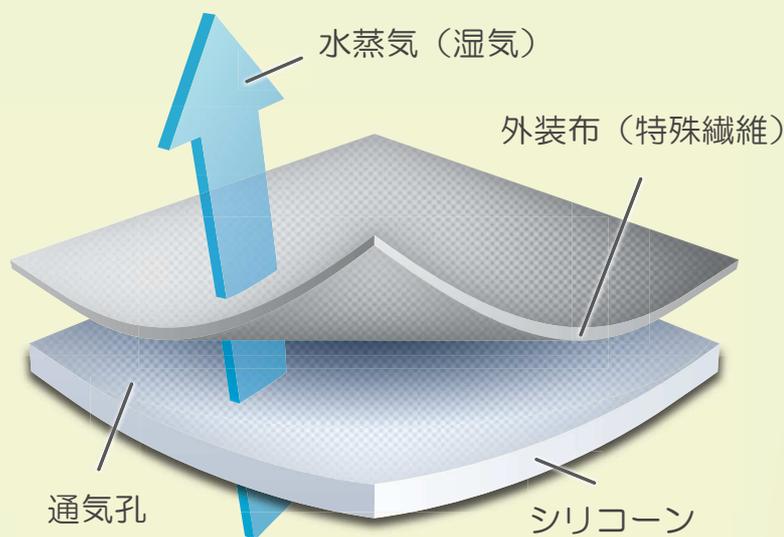

2018年度 新規指定製品
M1550 SoftSkin Air TF
大腿用ピンライナー

サイズ：28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 /
40 / 42 / 45

2017年度 新規指定製品
M1520 SoftSkin Air S40
下腿用ピンライナー

サイズ：18 / 20 / 21 / 22 / 23.5 /
25 / 26.5 / 28 / 30 / 32 / 34

完成用部品区分：骨格構造 / 義足用部品 / その他 / ライナー /
B ピンアタッチメントあり / B ピンアタッチメントあり

シリコーンに加工した特殊な通気孔により、
ライナー内の湿気が外へ排出されます。
シリコーンライナーの懸垂力を維持しつつ、
以下の効果が期待できます。

- ・蒸れにくい快適な使用感
- ・湿気が原因のピストンの減少
- ・汗や蒸れによる皮膚トラブルの減少


「ライナーは蒸れる…」という常識への挑戦

SoftSkin Air ユーザーの声

- ・汗はどうしようもないと思って諦めていましたが履いてビックリ！
- ・断端の蒸れが全然違う！
- ・以前のライナーには戻れない！
- ・汗で脱げそうな感じが無くなり安心！
- ・人前でライナーを外して拭く煩わしさが減り快適！

このような方には是非お試しください

- ・汗・蒸れが嫌でライナー式を諦めた方
- ・皮膚がふやけて、傷を作りやすい方
- ・スポーツをする方や、農業等の屋外作業の多い方
- ・汗でライナーが脱げそうになる方
- ・人前でライナーを脱ぐことに抵抗のある生活環境の方

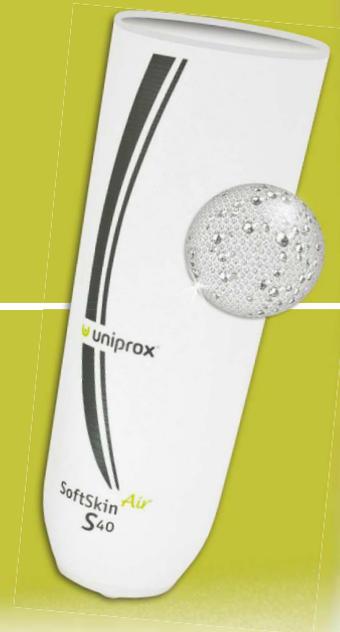

M1510 / M1515 下腿用シリコンライナーから引き継がれた特長

高品質で品質の安定したシリコンの採用

品質の安定した医療用シリコンを採用し、肌との親和性を高め、肌トラブルの発生を抑制します。また、高いクッション性があり断端を衝撃から保護し、圧痛の発生を抑制します。

外装布の剥離・カップの外れへの高い耐久性

特殊繊維とシリコンを強力に接着することにより、高い耐久性を発揮します。カットした上縁やソケット内加圧部での摩擦による外装の布の剥離を抑制します。また、柔軟性のあるディスタルカップを採用し、剥がれへの対策をしています。

関連部品



キャッチピンシステム

Ps-LOCK

M0290, M0291, M0292
の組み合わせにより、システム
全体の組付け高さが約38.5
mmと省スペースで組上げ
ることが可能です。



M1620

SAKAGEストラップタイプ

起毛の毛並みを利用して懸
垂補助、回旋防止に効果を
発揮します。
(4本入り)

株式会社 今仙技術研究所

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ3丁目1番8号

TEL : 058-379-2713 FAX : 058-379-2712

www.imasengiken.co.jp



- 本カタログの内容は2018年1月現在のものです。
- 予告なく製品の仕様を変更になる場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品では、色などに違いがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先



LAPOC Facebookページ始めました！ <https://www.facebook.com/LAPOC1972>
製品・イベントなど幅広い情報をお届けします。

QRコードはこちら

